

**Vážená pani doktorka / vážený pán doktor,
dovoľujeme si Vás informovať o postupe pri odberoch LBC cytológie**

MBC s.r.o. prevádzka Žilina spracováva odbery na vykonanie cytologických vyšetrení aj metódou LBC. Jej výhody sú predovšetkým v možnosti materiál opakovane vyšetriť a vykonať viaceré vyšetrenia z jedného odberu- vyšetrenie cytologického nálezu, HR-HPV, p16/Ki67, STD infekcií.




Na odber vzorky z endo a exocervixu je najvhodnejšie použiť Cervex Brush, alebo Endocervical brush. Pri použití Endocervical brush je na odber z exocervixu vhodné použiť plastovú špachtľu.



Technika odberu

Materiál na vyšetrenie LBC sa odoberá rovnako ako pri konvenčnej cytológii- zasunutím kefky do cervikálneho kanála, miernym pritlačením a jemnou rotáciou (cca 2x v smere hodinových ručičiek) sa získa dostatočné množstvo buniek potrebných na vyšetrenie. Odberovú kefku je nutné ihneď po odbere ponoriť do transportnej nádoby /vialky/ s fixačnou tekutinou a dôkladne vymyť. **Vialka musí byť označená menom a rokom narodenia pacientky, alebo číslom zhodným s označením na sprievodke.**

Odber použitím Cervex – Brush

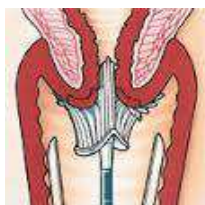

Odber použitím Endocervical brush a spatula

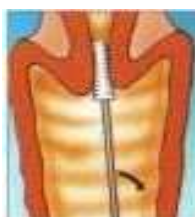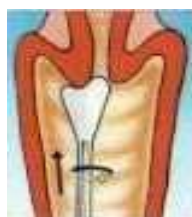

Dôležité upozornenie

- Pri odbere materiálu -
- nepoužívajte lubrikant
 - dbajte o to, aby boli obobraté bunky z exo aj endocervixu
 - odobratý materiál ihneď vypláchnite v roztoku vialky
 - hlavičku Cervex-brushu nenechávajte vo vialke
 - na vialku nelepte iné nálepky
 - nepoužívajte vialku po dátume spotreby
 - materiál na LBC vyšetrenie skladujte pri teplote od 15 - 30°C

V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie prosím kontaktujte:

MUDr Beráková Katarína t.č. 0903 885 167

alebo medicínskych reprezentantov spoločnosti:

Monika Dupkalová t.č. 0918 423 237

Mgr Ardian Ameti t.č. 0918 210 678

Mgr Slavomíra Augustínová t.č. 0917 975 403